

# INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCCIONES DE USO

## **TULIPS** NIPPLE SHIELDS PEZONERAS




Ardo medical AG  
Gewerbstrasse 19  
6314 Unterägeri  
Switzerland  
T +41(0)41 754 70 70  
F +41(0)41 754 70 71  
info@ardo-usa.com  
www.ardo-usa.com


**CE** 0123 Class 2a

Distributed in USA by:  
Comit Developers  
116 Toledo Drive  
Lafayette, LA 70506, USA  
T 844-411-ARDO (2736)  
www.ardo-usa.com  
customer-service@ardo-usa.com

1.)

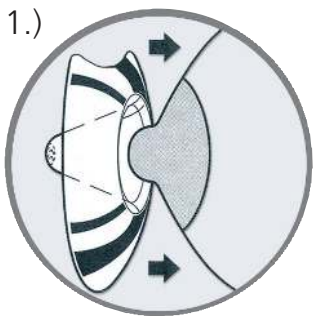

2.)

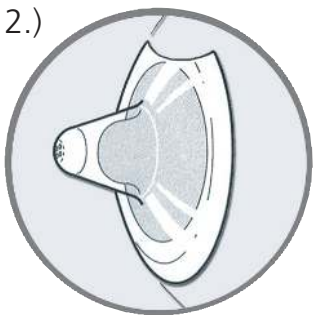

## INSTRUCTIONS FOR USE

### TULIPS NIPPLE SHIELDS

#### **Package contains:**

Two silicone nipple shields, size M (20 mm) or L (24 mm), one storage box.

#### **Intended use:**

Tulips nipple shields are suitable for short-term use to help with latching on and to protect sore, sensitive nipples during breastfeeding.

#### **Use:**

1. Moisten the inside of the nipple shield with a little breast milk or water, or use a lanolin nipple cream, so that it adheres more easily to the breast. Pull back the edge of the nipple shield and centre the shield over the nipple. The baby's nose should be at the tulip-shaped cut-out, so that it is touching the mother's skin (image 1).
2. Release the edges of the nipple shield onto the breast (image 2).

#### **Notes:**

Wear only when breastfeeding, remove after use and clean according to the instructions. Frequent sterilisation and boiling causes the material to wear faster. It is recommended to let the nipple shields dry before storing them in the storage box. Stop using the nipple shields if they show any signs of damage. Store the nipple shields and accessories out of the reach of children. Only wear the nipple shields temporarily while breastfeeding, and clean after use according to the instructions. If you have any questions, please contact a healthcare specialist. Tulips nipple shields are latex free.

**WARNING: CHOKING HAZARD – Small parts included. Keep small parts away from babies and children.**

**WARNING: It is important to use a nipple shield under the direction of a healthcare professional or lactation consultant.**

#### **Cleaning:**

Boil the nipple shields in water for ten minutes before the first use, and then once per day thereafter. Clean with soapy water after each use, then rinse well and allow to dry on a clean cloth. The nipple shields and storage box are dishwasher safe.

**CAUTION: Let components cool after boiling before touching them.**

#### **Disposal:**

Harmless, in accordance with local regulations.

Instructions for use in other languages are available at [www.ardomedical.com](http://www.ardomedical.com).

## INSTRUCCIONES DE USO TULIPS PEZONERAS

### **Contenido del paquete:**

Dos pezoneras de silicona, tamaño M (20 mm) o L (24 mm) y una caja de conservación.

### **Uso previsto:**

Las pezoneras Tulips son apropiadas para un uso breve en caso de problemas al amamantar y para pezones sensibles con heridas durante la lactancia.

### **Aplicación:**

1. Humedecer la pezonerera por la superficie de apoyo con algo de leche materna o agua, o utilizar pomada de lanolina para los pezones para que se adhiera mejor al pecho. Doblar el borde de la pezonerera. Colocar la pezonerera centrada en el pecho. La nariz del bebé debe situarse en el hueco, de manera que se apoye sobre la piel de la madre (Fig. 1).
2. Desdoblar el borde en el pecho (Fig. 2).

### **Indicaciones:**

Llevar la pezonerera solo cuando el bebé esté mamando y, después de utilizarla, lavarla siguiendo las instrucciones. Esterilizar las pezoneras y hervirlas en agua con frecuencia acelera el envejecimiento del material. Antes de guardar las pezoneras en la caja, se recomienda dejar que se sequen bien. Cuando haya indicios de daños, no volver a utilizar las pezoneras. Mantener las pezoneras y los accesorios fuera del alcance de los niños. Llevar la pezonerera solo de forma temporal y cuando el bebé esté mamando. Después de utilizarla, lavarla siguiendo las instrucciones. En caso de duda, póngase en contacto con personal especializado. Las pezoneras Tulips no contienen látex.

**ADVERTENCIA: PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO – Incluye piezas pequeñas. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de bebés y niños.**

**ADVERTENCIA: es importante utilizar pezoneras siguiendo las indicaciones de un profesional en el cuidado de la salud o de un consultor en lactancia.**

### **Limpieza:**

Hervir las pezoneras en agua durante diez minutos antes de utilizarlas por primera vez. Posteriormente, hervirlas una vez todos los días. Lavarlas con agua jabonosa después de cada uso, aclararlas bien y dejarlas secar sobre un paño limpio. Tanto las pezoneras como la caja de almacenamiento son aptas para el lavavajillas.

**PRECAUCIÓN: para poder tocar los componentes, deje que estos se enfríen después de haber hervido.**

### **Eliminación:**

Inocuas, conforme las normas locales vigentes.

Las instrucciones de uso están disponibles en otros idiomas en [www.ardomedical.com](http://www.ardomedical.com).